



Infusionsständer | Infusion stand

AUS HOCHWERTIGEM EDELSTAHL | MADE OF HIGH-QUALITY STAINLESS STEEL



Wandstärke: 1 mm
Wall thickness: 1 mm

Infusionsständer aus hochwertigem Edelstahl

- 5-Fuß-Stativ für sicheren Stand mit stabilem Kunststoffkreuz
- Sicherheitshaken für Infusionen max. 2 kg
- inklusive Tropfglas aus Kunststoff
- stufenlos höhenverstellbar
- geräuscharme Doppelaufrollen Ø 50 mm mit 2 Bremsrollen, 2 Sicherheitsrollen und 1 antistatischen Rolle
- inklusive Montageschlüssel
- einfache Montage
- einzeln verpackt

Infusion stand made of high-quality stainless steel

- 5-foot stand for stability with sturdy plastic juncture at the base
- safety hooks for the infusion bags/bottles
- maximum suspension weight per hook: 2 kg
- includes synthetic drip glass
- height is freely adjustable
- quiet Ø 50 mm double-wheeled castors with 2 locking castors, 2 safety castors and 1 antistatic castor
- assembly tool included
- easy assembly
- individually packaged

Edelstahl | stainless steel

- Minimale Höhe: ca. 120 cm
- Maximale Höhe: ca. 210 cm
- Ø Standfuß: ca. 60 cm
- ca. 3,3 kg
- minimum height: approx. 120 cm
- maximum height: approx. 210 cm
- Ø of stand foot: approx. 60 cm
- approx. 3.3 kg

VE = 1 St. | PU = 1 item

REF 09.11005.002

ERSATZTEILE | SPARE PARTS

159

Standard-Sicherheitshaken Standard safety hooks



REF 09.91210.021

Kunststoffhalterung Synthetic holder ring

für Tropfglas
for drip glass



REF 09.91111.001

Tropfglas | Drip glass

bruchsicher,
aus Kunststoff
shatter-proof,
made of
synthetic
material



REF 09.91012.001

Infusionsständer, schwer | Infusion stand, heavy


AUS HOCHWERTIGEM EDELSTAHL | MADE OF HIGH-QUALITY STAINLESS STEEL

Eine Standfestigkeit des Infusionsständers in Verbindung mit der Verwendung von Infusionsspritzen und Infusionspumpen bis maximal 5 kg am unteren, massiven Stativrohr, mit einem Schwerpunkt max. 15 cm von der Längsachse, ist gewährleistet. Achten Sie stets auf eine gleichmäßige Verteilung der Lasten, um ein Kippen durch einseitige Belastung zu verhindern.

The stability of the infusion stand is guaranteed when infusion syringes and pumps with a maximum weight of 5 kg are hung on the solid lower stand post such that their center of gravity is at most 15 cm from the vertical axis of the post. Always ensure that the load is uniformly distributed in order to prevent tipping.



Wandstärke: 1,5 mm
Wall thickness: 1,5 mm

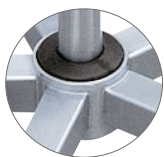

fest verschweißte Fußrohre
solidly-welded metal juncture

Zur Aufnahme von Infusionen/Infusionspumpen am unteren Stativrohr

- 5-Fuß-Stativ für sicheren Stand (Radkreuz aus Metall, d.h. mit fest verschweißten Fußrohren, dadurch leichtere Reinigung)
- Sicherheitshaken für Infusionen
- Belastung pro Aufhängehaken max. 3 kg
- Gesamtlast am Standard-Sicherheitshaken von 8 kg nicht überschreiten
- höhere Kippsicherheit (10 % Neigung bei 2 kg einseitiger Belastung am Aufhängekreuz)
- inklusive Tropfglas aus Kunststoff
- stufenlos höhenverstellbar
- geräuscharme Doppellaufrollen mit 2 Bremsrollen, 2 Sicherheitsrollen und 1 antistatischen Rolle
- inklusive Montageschlüssel
- einzeln verpackt

For holding Infusion bags and pumps on lower stand post

- 5-foot stand for high stability (solidly-welded metal juncture enables easy cleaning)
- safety hooks for the infusion bags/bottles
- maximum suspension weight per hook: 3 kg
- the total suspension weight of 8 kg must not be exceeded
- greater stability (tilt of 10% when a 2 kg load is hung from one side of the safety hook assembly)
- includes synthetic drip glass
- height is freely adjustable
- quiet double-wheeled castors with 2 locking castors, 2 safety castors and 1 antistatic castor
- assembly tool included
- individually packaged

Edelstahl | stainless steel

- Minimale Höhe: ca. 120 cm
- Maximale Höhe: ca. 210 cm
- Ø Standfuß: ca. 60 cm
- ca. 4,5 kg
- minimum height: approx. 120 cm
- maximum height: approx. 210 cm
- Ø of stand foot: approx. 60 cm
- approx. 4.5 kg

VE = 1 St. | PU = 1 item

REF 09.11010.002

ERSATZTEILE | SPARE PARTS

Standard-Sicherheitshaken Standard safety hooks



REF 09.91210.021

Kunststoffhalterung Synthetic holder ring

für Tropfglas
for drip glass



REF 09.91111.001

Tropfglas | Drip glass

bruchsicher,
aus Kunststoff
shatter-proof,
made of
synthetic
material



REF 09.91012.001

Infusionsständer | Infusion stand

VERCHROMT | CHROME-PLATED



Wandstärke: 1 mm
Wall thickness: 1 mm

Infusionsständer, verchromt

- 5-Fuß-Stativ für sicheren Stand mit stabilem Kunststoffkreuz
- Sicherheitshaken für Infusionen
- Belastung pro Aufhängehaken max. 2 kg
- inklusive Tropfglas aus Kunststoff
- stufenlos höhenverstellbar

- geräuscharme Doppelaufrollen Ø 50 mm mit 2 Bremsrollen, 2 Sicherheitsrollen und 1 antistatischen Rolle
- inklusive Montageschlüssel
- einfache Montage
- einzeln verpackt

Infusion stand, chrome-plated

- 5-foot stand for stability with sturdy plastic juncture at the base
- safety hooks for the infusion bags/bottles
- maximum suspension weight per hook: 2 kg
- includes synthetic drip glass
- height is freely adjustable

- quiet Ø 50 mm double-wheeled castors with 2 locking castors, 2 safety castors and 1 antistatic castor
- assembly tool included
- easy assembly
- individually packaged

Metall | metal

- Minimale Höhe: ca. 120 cm
- Maximale Höhe: ca. 210 cm
- Ø Standfuß: ca. 60 cm
- ca. 3,2 kg

- minimum height: approx. 120 cm
- maximum height: approx. 210 cm
- Ø of stand foot: approx. 60 cm
- approx. 3.2 kg

VE = 1 St. | PU = 1 item

REF 09.11800.002

ERSATZTEILE | SPARE PARTS

Standard-Sicherheitshaken Standard safety hooks



REF 09.91210.021

Kunststoffhalterung Synthetic holder ring

für Tropfglas
for drip glass



REF 09.91111.001

Tropfglas | Drip glass

bruchsicher,
aus Kunststoff
shatter-proof,
made of
synthetic
material



REF 09.91012.001

Praxisliege Classic | Examination couch Classic

ABWASCHBAR UND DESINFIZIERBAR | WASHABLE AND DISINFECTABLE

- Kunstleder (Phthalatfrei)
- Polsterstärke: 55 mm
- abwaschbar und desinfizierbar
- Gesamtgewicht: 32 kg
- Nenntraglast: 400 kg
- Bewegte Last: 135 kg
- verstellbares Rückenteil: Rastschere in 9 Stufen verstellbar bis ca. +34°
- Fingerschutz durch Polsterdistanz am beweglichen Rückenteil
- Gestell: pulverbeschichtet, grauweiß
- inkl. Papierrollenhalter
- Füße mit verfärbungsfreien Nivelier-Stopfen
- Lieferung: 1 Packstück

- synthetic leather (Phthalate free)
- thickness of cushion: 55 mm
- washable, disinfectable
- overall weight: 32 kg
- rated load: 400kg
- moving load: 135kg
- adjustable backrest: 9 latch settings up to approx.+34°
- cushion distance on movable backrest protects fingers
- frame: powder-coated, grey-white
- incl. paper roll holder
- legs with non-marking leveling feet
- Delivered pre-assembled (one piece)



162



Praxisliege Classic | Examination couch Classic

Maße: | Dimensions:

Länge: | Length: 1950 mm

Breite: | Width: 650 mm

Höhe: | Height: 650 mm

1	schwarz night		REF 09.49110.022
2	blau blue		REF 09.49110.032
3	grau grey		REF 09.49110.062

Drehhocker Classic | Swivel stool Classic

ABWASCHBAR UND DESINFIZIERBAR | WASHABLE AND DISINFECTABLE

- Kunstleder (Phthalatfrei)
 - Sitzhöhe: 450 – 570 mm
 - Polsterstärke: 50 mm
 - Sitzpolster Ø 37 cm
 - Gesamtgewicht: ca. 5,5 kg
 - Tragfähigkeit: max. 110 kg
 - Sicherheitsgasfeder mit Hebelauslösung
 - Laufrollen für Teppichböden geeignet
- synthetic leather (Phthalate free)
 - seat height: 450 – 570 mm
 - thickness of cushion: 50 mm
 - seat cushion Ø 37 cm
 - overall weight: approx. 5.5 kg
 - load capacity: 110 kg max.
 - safety pneumatic spring with release lever
 - the castors are suitable for carpet



Drehhocker Classic | Swivel stool Classic

1



1	schwarz night		REF 09.51302.022
2	blau blue		REF 09.51302.032
3	grau grey		REF 09.51302.062

Fußauftritt | Step stool

AUS EDELSTAHL | MADE OF STAINLESS STEEL

163



- 1- oder 2-stufig erhältlich
 - Tragfähigkeit: ca. 130 kg
- available with 1 or 2 steps
 - load capacity: approx. 130 kg

1-stufig | 1 step



ca. | approx.
40 x 25 x 22 cm

REF 09.61100.002

2-stufig | 2 steps



ca. | approx.
40 x 25 x 34 cm

REF 09.62100.002